

СНМО MOUTHPIECE® төхөөрөмж

дээрх эмчийн мэдээлэл

Амны хөндийн крио эмчилгээний төхөөрөмж

Хэрэглэх заалт: (Зөвхөн жороор олгоно)

Chemo Mouthpiece нь насанд хүрсэн өвчтөнүүдэд хими эмчилгээнээс үүдэлтэй үүсдэг амны хөндийн салст бүрхэвчийн өвчлөл, хүндрэлийг бууруулах зорилгоор амны хөндийн салст бүрхэвчийг хөргөхөд зориулагдсан.

Төхөөрөмжийн тайлбар:

Chemo Mouthpiece® нь амны хөндийд хөлдөөсөн байдлаар хэрэглэх үед амны хөндийн судсыг нарийсгаж, улмаар амны хөндий дэх хими эмчилгээний урсгалыг бууруулдаг амны хөндийн крио эмчилгээний төхөөрөмж юм. Chemo Mouthpiece® төхөөрөмжийг хими эмчилгээ хийх үед болон дууссаны дараа гэртээ хэрэглэхэд зориулсан бөгөөд зөвхөн жороор олгодог бүтээгдэхүүн юм. Chemo Mouthpiece® бол нэг өвчтөн олон удаа хэрэглэж болдог төхөөрөмж. Chemo Mouthpiece® төхөөрөмжийг эмнэлгийн зориулалттай силикон, шүүсэн ус, давсны уусмалаар хийсэн. Chemo Mouthpiece®-г урьдчилан дүүргэсэн бөгөөд дахин дүүргэх эсвэл өвчтөн өөрөө дүүргэх зориулалтгүй.

Төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлт (Хөргөх чадамж):

Ердийн хэмжээтэй хөлдөөсөн Chemo Mouthpiece® төхөөрөмжийг ½ цаг хэрэглэсний дараа дунджаар 37,4°F хөргөх боломжтой (35,1°F-ээс 39,6°F-ийн хэлбэлзэлтэй) бол жижиг хэмжээтэй Chemo Mouthpiece® төхөөрөмжийг ½ цаг хэрэглэсний дараа дунджаар 33,6°F хөргөх боломжтой (31,8°F-ээс 35,5°F хооронд). Температурын бууралт нь амны хөндийн орчны температураас хамаарч өөр байж болохыг анхаарна уу.

Chemo Mouthpiece Өвчтөний багцын заавар:

Chemo Mouthpiece® төхөөрөмжийг хими эмчилгээ хийх үед болон эмчилгээ дууссаны дараа гэртээ хэрэглэхэд зориулсан зөвхөн жороор олгодог бүтээгдэхүүн юм. Төхөөрөмжийг жороор бичиж өгсөний дараа Өвчтөний багц гэснийг өвчтөн гэртээ хүлээн авдаг. Үүнд зургаан Chemo Mouthpiece® төхөөрөмж багтдаг. Өвчтөн Chemo Mouthpiece® төхөөрөмжийг нээгээгүй давхар битүүмжилсэн савлагаанд дор хаяж 6 цагийн турш хөлдөөгчид хийнэ. Ингэснээр төв цэнхэр цөм хэсэг хөлдөж, төхөөрөмжийг ашиглахад бэлэн болно. Өвчтөн хөлдөөсөн төхөөрөмжийг өөрсдийн хими эмчилгээний уулзалтад авчрах ёстой. Өвчтөн хими эмчилгээ хийлгэхээр эмнэлэгт очихын өмнөхөн хөлдөөсөн төхөөрөмжийн хэсгүүдийг сав баглаа боодлоос нь салгаж, хими эмчилгээ хийлгэх эмнэлзүйн төв рүү зөөвөрлөхийн тулд өгөгдсөн хөргөгчинд хийнэ.

Хими эмчилгээ хийлгэх эмнэлэг дээр ашиглах болон хэрэглэх заавар:

Өвчтөн химийн эмчилгээ эхлэхээс 10-15 минутын өмнө шинэ хөлдөөсөн төхөөрөмжийг ашиглан амны хөндийг урьдчилан сэргийлж, судсыг нарийсгаж эхэлнэ. Өвчтөн хөлдөөсөн төхөөрөмжийг дулаан тусгаарлагч уут руу гулсуулан хийнэ. Өвчтөн Chemo Mouthpiece® төхөөрөмжийг ам руугаа тааруулан оруулж, уруулаа гадна талын ирмэг дээр нь тавина. Оруулсны дараа өвчтөн Chemo Mouthpiece® доторх хүйтэн шингэнийг эргэлдүүлэхийн тулд тусгаарлагч уут/суурийг ойр ойрхон шахаж өгнө. Chemo Mouthpiece® төхөөрөмжид ердийн амьсгалахыг дэмждэг амьсгалах хоолой бий. (Диаграм 1-ийг үзнэ үү.) Төхөөрөмжийг хэрэглэж байх үед өвчтөн тав тухтай байхын тулд толгойгоо хойш нь гэдийлгэнэ. (Диаграм 2-ийг үзнэ үү.)

Өвчтөн хөлдөөсөн Chemo Mouthpiece® төхөөрөмжийг хими эмчилгээ хийлгэх явцын туршид үргэлжлүүлэн ашиглана. Амны хөндийг хөрсөн хэвээр байлгахын тулд 30 минут тутамд шинэ хөлдөөсөн төхөөрөмжөөр сольж хэрэглэх шаардлагатай. Өвчтөний төхөөрөмжийг тэсвэрлэх чадвараас хамааран өвчтөн төхөөрөмжийг солих үедээ 5 минутын завсарлага авах боломжтой. Хими эмчилгээ хийлгэж дууссаны дараа өвчтөн нэмэлтээр 10-15 минутын турш төхөөрөмжийг үргэлжлүүлэн хэрэглэнэ.

Шаардлагатай төхөөрөмжийн тоо хэмжээ:

Өвчтөнд хими эмчилгээ хийлгэх төвд шаардлагатай төхөөрөмжүүдийн тоог тэдний хими эмчилгээний дуслын хугацаанаас хамааруулан тодорхойлно (дуслын хугацаа ½ цаг тутамд нэг нэгж).

Төхөөрөмжийн тоо хэмжээг ашиглах жишээ нь дараах байдалтай байна:

Хэрэв хими эмчилгээний дэглэм 1 цагийн хугацаанд үргэлжилдэг ба дуслын өмнөх болон дараах хугацаанд нийт ½ цаг нэмбэл өвчтөн 1,5 цагийн турш гурван хөлдөөсөн нэгж хэрэглэнэ.

Эмнэлзүйн дараах хими эмчилгээ хийх өвчтөний гэрийн хэрэглээ:

Өвчтөн ашигласан төхөөрөмжийг гэртээ авчирч, хэрэглэх зааврын дагуу цэвэрлэнэ. Өвчтөнүүд нэгжийг цэвэрлэсний дараа дахин битүүмжлэх уутанд хийж дахин хөлдөөх хэрэгтэй. Өвчтөнүүдэд хими эмчилгээ хийлгэх өдрөөс эхлэн дараагийн тав хоногт гэртээ буцаж ирсэний дараа шинэ хөлдөөсөн төхөөрөмжийг ашиглахыг заадаг. Өвчтөнүүд уг төхөөрөмжийг гэртээ өдөрт хоёр удаа, дор хаяж 30 минутын турш ашиглана. Өвчтөн амандаа төхөөрөмжийг 30 минутын турш хийгээд тэсвэрлэх чадваргүй тохиолдолд 5 минутын завсарлага авч болно.



АШИГЛАХ АНХААРУУЛГА БОЛОН ТУСГАЙ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ:

ӨВЧТӨН СИЛИКОНД МЭДРЭГ БОЛ ҮҮНИЙГ БҮҮ ХЭРЭГЛЭ.

ХЭРЭВ АРСНЫ ЦОЧРОЛ, ХАРШЛЫН ШИНЖ ТЭМДЭГ ИЛЭРВЭЛ ЭСВЭЛ ТӨХӨӨРӨМЖ ГООЖИХ, БҮТЭЦ НЬ АЛДАГДАХ ТОХИОЛДОЛД ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АШИГЛАХЫГ ЗОГСООНО УУ.

ХАЗАЖ БОЛОХГҮЙ; ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ХАЗАХАД ЗОРИУЛАЛТЫН ДАГУУ АШИГЛАЖ БОЛОХГҮЙ БОЛЖ ГООЖИЖ БОЛЗОШГҮЙ.

ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ЦЭВЭРЛЭХИЙН ТУЛД АЯГА УГААГЧИД ХИЙХ ЭСВЭЛ БУЦАЛГАЖ БОЛОХГҮЙ.

ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ (ХЭРЭГЛЭХИЙН ӨМНӨ БОЛОН ДАРАА) ХӨЛДӨӨГЧИД ХАДГАЛАЛГҮЙ АШИГЛАЖ БОЛОХГҮЙ.

ХЭРЭВ ТАНД АМЬСГАЛАХАД ХҮНДРЭЛТЭЙ ЭСВЭЛ ЗҮРХТЭЙ ХОЛБООТОЙ АСУУДАЛ БАЙДАГ БОЛ ЭНЭ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АШИГЛАЖ БОЛОХГҮЙ.

ХӨРГӨХӨД СӨРӨГ ҮЙЛЧЛЭЛ ҮЗҮҮЛЭХ ЭМИЙН БОДИСУУДАЙ (жишээлбэл, ОКСАЛИПЛАТИН) ХАМТ ХЭРЭГЛЭХ ҮЕД АНХААРАЛ СЭРЭМЖ ХЭРЭГТЭЙ.


СНЕМО MOUTHPIECE БОЛОН САВЛАГАА НЬ ГЭМТЭЛТЭЙ БОЛ ХЭРЭГЛЭЖ БОЛОХГҮЙ.

ChemoMouthpiece, LLC-тэй холбогдож солиулах болон зааварчилгаа авна.

АНХААРУУЛГА: Бүх гаж нөлөөтэй холбоотой үйл явдал, гомдол, ослын талаар ChemoMouthpiece, ХХК-д 866-496-8858 утсаар эсвэл support@chemomouthpiece.com имэйлээр мэдэгдэнэ үү

ДИАГРАМ 1 - Амны хөндийн төхөөрөмжийн загвар

ГАДНА ТУНГАЛАГ ХЭСГИЙГ УРЬДЧИЛАН
ДАВСНЫ УУСМАЛААР ДҮҮРГЭСЭН

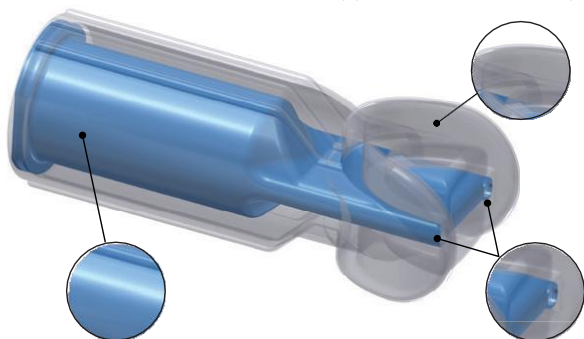

ДОТОР ТАЛЫН ЦЭНХЭР ХЭСГИЙГ
ШҮҮСЭН УСААР ДАХИН
ДҮҮРГЭСЭН

АМЬСГАЛАХ ХООЛОЙ

Хүүхдэд хэрэглэх:

Хүүхдэд Chemo Mouthpiece® хэрэглэх төхөөрөмжийг судлаагүй байна.

Түүний бусад эмийн бүтээгдэхүүнтэй харилцах:

Энэ бүтээгдэхүүнийг бусад эмүүдтэй харьцах сөрөг нөлөө одоогоор мэдэгдээгүй байна.

Хэрхэн нийлүүлдэг:

Chemo Mouthpiece® төхөөрөмжийг эмнэлэгт хими эмчилгээний хими эмчилгээ хийлгэх хугацаанаас хамааран өвчтөнд нэмэлт нэгж шаардлагатай үед зургаан багц болон нэмэлт хоёр багц хэлбэрээр өгдөг. Энэхүү зургаан багцад зургаан төхөөрөмж, зургаан ширхэг хөлдөөгч гелэн дэвсгэр, дулаан хадгалах хөргөгч сав, дулаан тусгаарлах уут, мөн амьсгалын гуурс цэвэрлэх зориулалттай утсан сойзнууд багтана.

Хадгалах:

Chemo Mouthpiece® нь хоёр жилийн хугацаатай бөгөөд вакуум битүүмжилсэн уутанд хадгалах ёстой. Вакуум битүүмжилсэн уутыг нээсэн даруйд Chemo Mouthpiece® төхөөрөмжийг хөлдөөгчид хадгална.

Анхаар:

Холбооны хуулиар энэ төхөөрөмжийг эмч эсвэл зохих зөвшөөрөлтэй эмчийн захиалгаар худалдахыг хязгаарласан. Зөвхөн жороор олгоно.

Устгах:

Амны хөндийн энэ төхөөрөмжийг энгийн хотын хог хаягдлаар хаяж болно.

ДИАГРАМ 2 – Зориулалт (зураглалын зориулалтаар тусгаарлагч уутгүй)



Зөвхөн жороор олгоно. Анхаар: Холбооны (АНУ) хуулиар энэ төхөөрөмжийг эмчийн захиалгаар эсвэл зарж борлуулахыг хязгаарласан.

CHEMO
MOUTHPIECE®

Нэмэлт мэдээлэл авах бол зочлоорой: www.chemomouthpiece.com

ХУВИЛБАР 10/14/2024